

Lansinoh®

Elektrische Milchpumpe



Stillexperten seit über 30 Jahren

Lansinoh® Elektrische Milchpumpe

- Sanftes und effektives Abpumpen mit 2-Phasen-Technologie: Stimulations- und Abpumpphase
- Handlich, leicht und besonders leise, einfach zu reinigen
- Saugstärke individuell regulierbar in 6 Stufen für sanftes bis effektives Abpumpen
- LED-Indikatoren zeigen gewählte Phase und Saugstärke an
- Inklusive Comfort-Fit™ Saugaufsatz und NaturalWave® Sauger in Größe S

Die Kompakte für sanftes und effizientes Abpumpen – höchste Qualität und Komfort in einem leichten, handlichen Gerät für zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs. Die Lansinoh® Elektrische Milchpumpe ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit und kinderleicht zu bedienen. In der Stimulationsphase wird die Brust sanft auf das Abpumpen vorbereitet und der Milchspendereflex stimuliert. In der Abpumpphase kann die Muttermilch effektiv gewonnen werden. Die Saugstärke lässt sich in beiden Phasen individuell in sechs Stufen regeln. Ein weicher, komfortabler Silikon-Saugaufsatz sorgt für guten Halt und optimalen Sitz. Kompatibel mit Lansinoh® Weithalsflaschen und NaturalWave® Saugern zum Aufbewahren und Füttern. Batterie- oder Netzbetrieb: ideal auch für unterwegs.

Material Pumpset: Polypropylen und Silikon, BPA-/BPS-frei


Art.-Nr.	54050
Art.-Bezeichnung	Lansinoh® Elektrische Milchpumpe
Produkt-EAN	506 006 299 0126
Inhalt	1 Stück mit Zubehör
Maße in mm (BxHxT)	280 x 240 x 94
Artikelgewicht (g)	1.165
UVP inkl. MwSt.	119,99 €
Versandeanheit	1



Stimulationsphase



Abpumpphase

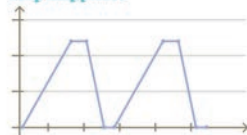

y: Saugstärke (mmHg), x: Zeit (msec)